

ODOFIN™

TasteStrips




Taste Test 25

Winghart
MESSTECHNIK

ITALIANO



PZN: 17975326

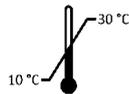

Burghart Messtechnik GmbH
Uetersener Straße 6
D - 25488 Holm
☎ +49 4103 80076-0
☎ + 49 4103 80076-29

✉ info@burghart-mt.de
🌐 www.burghart-mt.de



Contenuti

Scopo	4
Utente	4
Aree di applicazione.....	4
Gruppo di età	4
Avvertenze.....	4
Controindicazioni	4
Informazioni per il paziente	5
Informazioni sull'utente	5
Prestazioni.....	5
Attuazione.....	5
Durata.....	5
Stoccaggio:.....	5
Smaltimento.....	5
Accessori	5
Tessuti utilizzati	6
LEGGENDA.....	6

IMPORTANTE
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO
SALVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Scopo

Esame di orientamento per verificare la presenza della capacità gustativa.

Utente

Il test deve essere eseguito esclusivamente da medici professionisti.

Aree di applicazione

Circa il 10-15% dei pazienti con disturbi olfattivi presenta anche disturbi della degustazione. Pertanto, si raccomanda di verificare la capacità di degustazione e di odorazione. Le strisce delle 4 qualità gustative di base "dolce", "acido", "salato" e "amaro" consentono di esaminare la funzione gustativa.

Il "Test del gusto 25" è un test di accompagnamento al "Test di screening 12" e serve a orientarsi sull'opportunità di avviare ulteriori esami.

Come ulteriore esame, è possibile effettuare il "Test del gusto 50". Contiene strisce gustative con le qualità gustative di base "dolce", "acido", "salato" e "amaro" in 4 diverse concentrazioni per poter determinare la gravità di un disturbo del gusto.

Gruppo di età

Non ci sono restrizioni di età per il test.

Avvertenze



Chiedete alle vostre pazienti se sono incinte. La qualità del gusto amaro NON deve essere utilizzata su donne in gravidanza. La chinina è utilizzata come sostanza amara.



Utilizzare la striscia di degustazione solo UNA volta per paziente o per applicazione sulla lingua. Successivamente, la striscia di degustazione deve essere smaltita.



Se si è allergici a una qualsiasi delle sostanze utilizzate (vedi tabella a pagina 6), non utilizzare questo test.



Evitare il contatto con la pelle durante la somministrazione e utilizzare le pinzette in dotazione.



Evitare movimenti rapidi con la striscia di degustazione durante l'applicazione nel cavo orale.



Si noti che un prodotto compromesso può portare a una valutazione errata.

Il prodotto può essere compromesso da:

- Variazione della concentrazione causata da una conservazione non corretta
- Test incompleto o confusione delle strisce di degustazione se non si utilizzano i contenitori di conservazione forniti.
- Variazione della concentrazione causata dall'uso oltre la data di scadenza
- in caso di mancata osservanza della corretta applicazione descritta nelle istruzioni per l'uso.
- in caso di applicazione errata, causata da un'etichettatura illeggibile o assente

Controindicazioni

Non utilizzare la "striscia amara" in caso di gravidanza. Non utilizzare in caso di allergia a una delle sostanze utilizzate.

Informazioni per il paziente

Il paziente deve essere informato del test nel modo seguente: Il loro senso del gusto deve essere messo alla prova. Questo viene fatto con l'aiuto di strisce di degustazione. Leccano strisce di cartone imbevute di diverse concentrazioni di sostanze gustative di tipo dolce, acido, salato e amaro. Le sostanze utilizzate nel test sono innocue per la salute nella forma presentata e sono utilizzate negli alimenti (saccarosio, cloruro di sodio, acido citrico, chinino - come nel limone amaro, per esempio).

Se non si sente alcun sapore, si prega di indicarlo ("nessun sapore"). La valutazione del test terrà conto della capacità di percepire o identificare una qualità.

Il test richiede circa 5 minuti per paziente.

Informazioni sull'utente

L'applicazione viene effettuata durante il test della capacità di degustazione, posizionando le strisce di degustazione sulla lingua e chiudendo la bocca (la lingua può essere mossa dal paziente). Se si è interessati alla sensibilità gustativa di determinate aree della lingua (ad esempio, test di separazione laterale), la bocca rimane aperta e la striscia viene a contatto solo con questa area finché il paziente non è in grado di dare una risposta. Le sostanze utilizzate nel test sono innocue per la salute nella forma presentata e sono utilizzate negli alimenti (saccarosio, sale da cucina, acido citrico, chinino - come il limone amaro).

Prestazioni

Prendete la pinzetta in una mano e aprite il barattolo con l'altra contemporaneamente. Le strisce di degustazione devono essere prelevate SOLO con le pinzette in dotazione. La risposta del paziente può essere annotata sul modulo di valutazione () , ma non ha alcuna influenza sul punteggio del test Screening 12.

Attuazione

Rimuovere la striscia di degustazione con la pinzetta in dotazione e posizionarla al centro della lingua in modo che la striscia di degustazione sporga ancora leggermente dalla bocca. Il paziente deve ora chiudere la bocca e muovere leggermente la lingua. Dopo 5-10 secondi, si può chiedere al paziente quale sapore ha percepito. Rimuovere nuovamente la striscia reattiva.

Si raccomanda di attendere almeno 30 secondi tra la presentazione delle diverse strisce e di lasciare che il paziente sciacqui la bocca con acqua. Inoltre, il gusto "amaro" (can M) dovrebbe essere offerto per ultimo, poiché è quello presente più a lungo. Come per il test dell'olfatto, è disponibile una scheda di selezione con i termini.

Durata

Ogni striscia di degustazione è provvista di una data di scadenza. Il formato è GG MM AA. Non aperte, le strisce di degustazione hanno una durata di conservazione di 5 anni.

Dopo l'apertura, la durata di conservazione è limitata a 12 mesi. Inserire il periodo della prima apertura sul simbolo adesivo (12M) del barattolo.

Stoccaggio:

Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente (10-30 °C), non in frigorifero.

Smaltimento



Le strisce di sporco usate devono essere smaltite immediatamente nei rifiuti domestici.

Accessori

Componente	Numero di articolo
Pinzette	LA-13-00310
Scatola di immagazzinaggio	LA-13-00338
Scheda a scelta multipla	LA-18-00080

Tessuti utilizzati

Qualità del gusto	Tessuto
Acido	Acido citrico
Salato	Cloruro di sodio
Dolce	Saccarosio
Amaro	Chinino cloridrato diidrato
Solvente	Aqua Bidest

LEGGENDA

	Identificazione
	Risoluzione
	Gruppo di età
	Temperatura di applicazione
	Data di scadenza
	Proteggere dalla luce solare
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Conservare all'asciutto
	Produttore
	Osservare gli avvisi di pericolo,
	Solo per uso singolo
	Non utilizzare durante la gravidanza
	Dolce
	Salato
	Aspro
	Amaro